



Saline
Saltwater Solution
For all contact lenses

Informační leták

UNICARE® Izotonický 0,9% roztok chloridu sodného
Izotonický roztok pro oplachování.
Pro všechny typy kontaktních čoček.

Fyziologický roztok Unicare bez konzervačních látek je vhodný pro oplachování kontaktních čoček a jejich zvlhčení při pocitu suchých očí.

Složení:

Aktivní složky: chlorid sodný.
Konzervační látky: bez konzervačních látek.

Pokyny k použití:

Bezpečnostní uzávěr na láhvi se otevře při otočení víčka.
Aby s zabránilo znečištění tekutiny, nesahejte rukou na kapátko.



Varování:

Udržujte mimo dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě od 4 °C do 25 °C.
V případě podráždění očí přestaňte výrobek používat a obraťte na svého lékaře nebo na specialistu v oblasti kontaktních čoček.
Zkontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr neporušen.



Melleson Pharma B.V., NL-4817 ZH 7384 Breda
info@melleson.nl, www.unicare-info.nl



Saline
Saltwater Solution
For all contact lenses

Pakkaukseloste

UNICARE® Isononinen natriumkloridiliuos 0,9 %
Isononinen liuos huuhtelemiseen.
Kaikenlaisille piilolinssille.

Säilöntäaineeton Unicare-suolaliuos sopii piilolinssien huuhtelemiseen ja kosteuttamiseen silmien ollessa kuivia.

Ainesosat:

Vaikuttava aine: natriumkloridi.
Säilöntäaine: ei sisällä säilöntäaineita.

Käyttöohjeet:

Pullon takuusiinetti avataan korkkia kiertämällä.
Älä koske tiputtimeen, jotta neste ei saastuisi.




Varoitukset:

Ei lasten ulottuville.
Säilytä 4 °C - 25 °C lämpötilassa.
Jos silmissä esiintyy ärsytystä, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin tai piilolinssien asiantuntijaan.
Tarkista, että takuusiinetti on ehjä.



Melleson Pharma B.V., NL-4817 ZH 7384 Breda
info@melleson.nl, www.unicare-info.nl

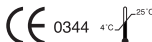

Saline
Saltwater Solution
For all contact lenses

Packungsbeilage

UNICARE® Natriumchloridlösung 0,9%
Isotonische Abspüllösung.
Für alle Kontaktlinsen.

Unicare Salzlösungen ohne Konservierungsmittel eignen sich zum Spülen von Kontaktlinsen sowie zum Befeuchten der Linsen, wenn sich Ihre Augen trocken anfühlen.

Zusammensetzung:

Wirksame Substanz: Natriumchlorid.
Konservierungsmittel: ohne Konservierungsmittel.

Gebrauchsanweisung:

Die Flasche wird durch Drehen des Verschlusses entsiegelt.
Verunreinigungen vermeiden. Öffnung nicht berühren.




Warnhinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Aufbewahrungstemperatur 4°C bis 25°C.
Bei Irritationen sofort einen Arzt oder den Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen.
Der versiegelte Verschluss der Flasche muss unbeschädigt sein.



Melleson Pharma B.V., NL-4817 ZH 7384 Breda
info@melleson.nl, www.unicare-info.nl

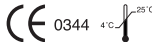

Saline
Saltwater Solution
For all contact lenses

Information leaflet

UNICARE® Isononine sodium chloride 0,9% solution
Isotonic solution for rinsing.
For all types of contact lenses.

Unicare salt solution without preservatives is suitable for rinsing contact lenses and moisturising lenses when your eyes feel dry.

Composition:

Active Ingredient: sodium chloride.
Preservative: no preservatives.

Instructions:

Unscrewing the cap from the bottle will break the guarantee seal.
Do not touch the dropper tip as this may contaminate the solution.




Warnings:

Keep out of the reach of children.
Store between 4°C and 25°C (40°F and 77°F).
In case of eye irritation, discontinue use and consult your doctor/contact lens specialist.
Make sure the guarantee seal is intact.



Melleson Pharma B.V., NL-4817 ZH 7384 Breda
info@melleson.nl, www.unicare-info.nl

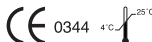

Saline
Saltwater Solution
For all contact lenses

Informationsfolder

UNICARE® isotonisk natriumkloridopløsning 0,9 %
Isotonisk opløsning til skylning.
Til alle typer kontaktlinser.

Unicare saltopløsning uden konserveringsmidler er velegnet til at skylle kontaktlinser og fugte linser, når dine øjne føles tørre.

Sammensætning:

Aktiv ingrediens: natriumklorid.
Konserveringsmiddel: ingen konserveringsmidler.

Instruktioner i brug:

Garantiforseglingen på flasken åbnes ved at dreje kapslen.
Berør ikke spidsen for at undgå forurening af væsken.




Advarsler:

Holdes uden for børns rækkevidde.
Opbevares mellem 4°C og 25°C.
I tilfælde af irritation af øjet skal du ophøre med at bruge produktet og konsultere din læge eller en kontaktlinsespecialist.
Kontroller, om garantiforseglingen er intakt.



Melleson Pharma B.V., NL-4817 ZH 7384 Breda
info@melleson.nl, www.unicare-info.nl

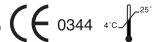

Saline
Saltwater Solution
For all contact lenses

Betegtájékoztató

UNICARE® Izotóniás nátrium-klorid oldat, 0,9%-os
Izotóniás tisztítófolyadék.
Minden típusú kontaktlencséhez.

A Unicare tartósítószer nélküli sóoldata megfelelő kontakt lencsék tisztításához és nedvesítéséhez, amikor száraznak érzi szemét.

Összetétel:

Aktiv összetevő: nátrium-klorid.
Tartósítószer: nem tartalmaz tartósítószeret.

Használati útmutató:

A biztonsági záró fólia a kupak elfordításával nyílik fel.
A folyadék szennyeződésének elkerülése érdekében ne érintse meg a flakon cséppentőjét.




Figyelmeztetés:

Gyermekektől távol tartandó.
Tárolás 4°C és 25°C közötti hőmérsékleten.
Amennyiben a termék irritálja szemét, függesse fel a termék használatát, és lépjen kapcsolatba kezelőorvosával vagy kontakt lencse specialistaival.
Ellenőrizze a biztonsági záró fólia épségét.



Melleson Pharma B.V., NL-4817 ZH 7384 Breda
info@melleson.nl, www.unicare-info.nl

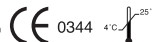

Saline
Saltwater Solution
For all contact lenses

Brochure d'informations

UNICARE® Solution de chlorure de sodium à 0,9 %
Liquide de rinçage isotonique.
Pour tous types de lentilles de contact.

Le sérum physiologique Unicare sans conservateur convient parfaitement au rinçage des lentilles de contact et à l'humidification des lentilles en cas de sensation d'yeux secs.

Composition :

Substance active : chlorure de sodium.
Conservateur : sans conservateurs.

Mode d'emploi :

Le sceau de garantie sera rompu en tournant le bouchon du flacon.
Ne pas toucher le compte-goutte afin d'éviter d'altérer la solution.




Précautions :

A garder hors de portée des enfants.
A conserver entre 4°C et 25°C.
En cas d'irritation, cessez l'utilisation et consultez votre médecin ou votre spécialiste en lentilles de contact.
Contrôlez si le sceau de garantie est intact.



Melleson Pharma B.V., NL-4817 ZH 7384 Breda
info@melleson.nl, www.unicare-info.nl

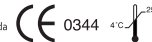

Saline
Saltwater Solution
For all contact lenses

Foglio illustrativo

Soluzione isotonica di cloruro di sodio allo 0,9% UNICARE®
Soluzione isotonica per risciacquo.
Per tutti i tipi di lenti a contatto.

La soluzione salina Unicare senza conservanti è idonea al risciacquo delle lenti a contatto e all'idratazione delle lenti per quando si sentono gli occhi troppo asciutti.

Composizione:

Principio attivo: cloruro di sodio.
Conservante: senza conservanti.

Modalità d'uso:

Il sigillo di garanzia sulla bottiglia si apre ruotando il tappo.
Non toccare il contagocce del flacone per evitare di contaminare il liquido.




Avvertenze:

Tenere fuori della portata dei bambini.
Conservare tra 4 °C e 25 °C.
In caso d'irritazione dell'occhio, interrompere l'uso del prodotto e consultare il proprio medico o uno specialista di lenti a contatto.
Controllare che la capsula di garanzia sia integra.



Melleson Pharma B.V., NL-4817 ZH 7384 Breda
info@melleson.nl, www.unicare-info.nl

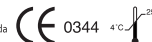



**Saline
Saltwater Solution**
For all contact lenses

Bijsluiter

UNICARE® Natriumchloride 0,9% oplossing
Isotone spoelvoestof.
Voor alle contactlenzen.

Unicare zoutoplossing zonder conserveringsmiddelen is geschikt voor het afspoelen van contactlenzen en voor het bevochtigen van lenzen bij een gevoel van droge ogen.

Samenstelling:

Werkzaam bestanddeel: natriumchloride.
Conserveermiddel: vrij van conserveermiddelen.

Gebruiksaanwijzing:

De garantiesluiting van de flacon wordt verbroken door de dop los te draaien.
De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen.




Waarschuwingen:

Buiten bereik van kinderen houden.
Bewaren tussen 4°C en 25°C.
In geval van oogirritatie staak het gebruik en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist.
Controleer of de garantiesluiting ongeschonden is.



Mellessen Pharma B.V., NL-4817 ZH 7384 Breda
info@mellessen.nl, www.unicare-info.nl

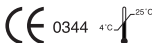

**Saline
Saltwater Solution**
For all contact lenses

Ulotka informacyjna

Izotoniczny roztwór chlorku sodu 0,9% UNICARE®
Izotoniczny roztwór do płukania.
Do wszystkich typów soczewek kontaktowych.

Roztwór soli Unicare bez dodatku środków konserwujących jest odpowiedni do czyszczenia soczewek kontaktowych i nawilżania ich, gdy pojawia się uczucie suchości oczu.

Skład:

Składnik aktywny: chlorek sodu.
Środek konserwujący: bez dodatku środków konserwujących.

Wskazówki dotyczące użytkowania:

Pieczeć gwarancyjną na butelce otworzyć się, gdy nakrętka zostanie przekręcona.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu płynu, nie należy dotykać kroplomierza.




Ostrzeżenie:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze 4°C - 25°C.
W przypadku wystąpienia podrażnienia oczu należy zaprzestać używania produktu i zasięgnąć porady lekarza lub optyka.
Sprawdzić, czy pieczęć gwarancyjna nie jest naruszona.



Mellessen Pharma B.V., NL-4817 ZH 7384 Breda
info@mellessen.nl, www.unicare-info.nl

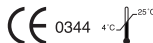

**Saline
Saltwater Solution**
For all contact lenses

Bipacksedel

UNICARE® koksaltlösning, natriumklorid 0,9 %
Koksaltlösning för sköljning.
För alla typer av kontaktlinser.

Unicare saltlösning med skyddande egenskaper är lämpad för att skölja kontaktlinser och återfukta linser när dina ögon känns torra.

Sammansättning:

Aktiv ingrediens: natriumklorid.
Konserveringsmedel: inga konserveringsmedel.

Användaranvisningar:

Garantiförseglingen på flaskan bryts då du skruvar av korken.
Rör ej droppinsatsen för att förhindra förorening av vätskan.




Varningar:

Håll utom räckhåll för barn.
Förvara mellan 4 °C och 25 °C.
Om det uppstår irritation i ögonen, sluta att använda produkten och rådfråga din läkare eller kontaktlinsspecialist.
Kontrollera att skyddslocket inte är skadat.



Mellessen Pharma B.V., NL-4817 ZH 7384 Breda
info@mellessen.nl, www.unicare-info.nl

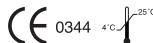

**Saline
Saltwater Solution**
For all contact lenses

Informačný leták

Izotonicný roztok chloridu sodného 0,9% UNICARE®
Izotonicný roztok na preplachovanie.
Pre všetky typy kontaktných šošoviek.

Solný roztok Unicare bez konzervačných látok je vhodný na preplachovanie kontaktných šošoviek a na zvlhčenie šošoviek, ak máte pocit, že sú vaše oči suché.

Zloženie:

Aktívna zložka: chlorid sodný.
Konzervačné látky: žiadne konzervačné látky.

Návod na použitie:

Záručné tesnenie na fľaštičke otvoríte pokrútením uzáveru.
Kvapkadla sa nedotýkajte, aby ste predišli znečisteniu kvapaliny.




Varovania:

Udržujte mimo dosahu detí.
Skladujte pri teplotách medzi 4 °C a 25 °C.
P3020001_SKYV prípade podráždenia očí prestaňte výrobný výrobok používať a konzultujte to so svojím lekárom alebo špecialistom na kontaktné šošovky.
Skontrolujte, či je záručné tesnenie neporušené.



Mellessen Pharma B.V., NL-4817 ZH 7384 Breda
info@mellessen.nl, www.unicare-info.nl

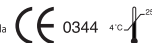

03/2013
SALB240D2.13V1B
01REF1049